


WÖHLK Hochwertige Contactlinsenpflege



wöhlk CONTACTLINSEN

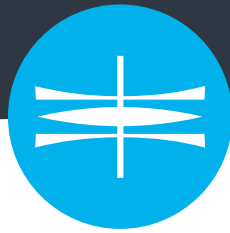

Wöhlk Contactlinsen GmbH

Hausanschrift:

Bürgermeister-Schade-Str. 12-16
D-24232 Schönkirchen

Servicezeiten:

Mo. - Fr. 8.30 - 18.00 Uhr

Postfach- & Retouren:

Postfach 45 20 | D-24044 Kiel

Servicenummern:

T +49 (0) 431 991-17 77

F +49 (0) 431 991-15 55

Anpassberatung:

+49 (0) 431 991-18 88

Service online:

Email bestellung@woehlk.com

info@woehlk.com

Internet woehlk.com

Österreich Wöhlk Contactlinsen Vertriebs GmbH

Hausanschrift:

Hauptplatz 10
A-8952 Irdning

Servicezeiten:

Mo. - Fr. 8.30 - 12.30 Uhr
13.30 - 17.30 Uhr

Servicenummern:

T +43 (0) 810-97 70 75

F +43 (0) 810-97 70 76

Service online:

Email oesterreich@woehlk.com

Extra gründlich & ultraschnell



P

WÖHLK PEROXID

Das optimale 1-stufige Desinfektionssystem für weiche Contactlinsen.

- ⊕ Intensive Reinigung und Desinfektion innerhalb von nur 60 Minuten
- ⊕ Frei von Konservierungsstoffen
- ⊕ Sichere und einfache Handhabung durch Farbindikator
- ⊕ Verbessertes Langzeitragekomfort dank HPC-Benetzungswirkstoff

Wirkungsweise


Das einstufige Wöhlk Peroxidsystem gewährleistet die für eine vollständige Desinfektion erforderliche 12-minütige Einwirkzeit der voll konzentrierten Lösung (3%) bei einer Gesamtanwendungsdauer von nur 60 Minuten.

Bei Platindisk-Systemen können sich durch die sofort einsetzende Neutralisation Sauerstoffbläschen an der Linsenoberfläche bilden, die eine Desinfektion der darunter liegenden Bereiche hemmen.

Der Farbindikator Vitamin B2 zeigt an, wann die Lösung neutralisiert ist. Wenn die Linsen länger als 1-2 Tage in der neutralisierten Lösung verbleiben, verblasst die Gelbfärbung und indiziert, dass vor Wiederverwendung der Linsen ein neuer Desinfektionsvorgang erforderlich ist.

Verwendungsbereich

- bei regelmäßigem Linsentragen
- ideal bei hohem Desinfektions- und Reinigungsbedarf
- bei empfindlichen und trockeneren Augen
- geeignet bei Unverträglichkeiten mit Konservierungsstoffen
- für Hydrogel-, Biohydrogel & Silikonhydrogellinsen

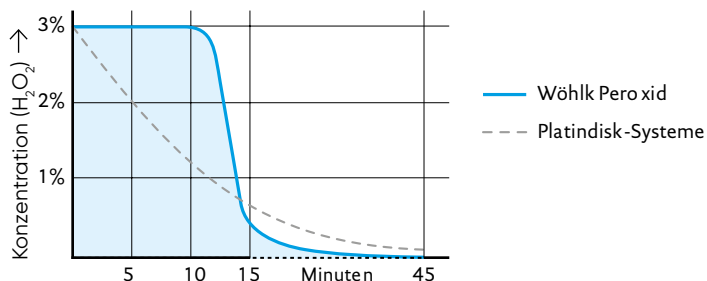

Produktbeschreibung

Aktiver Inhaltsstoff:	3% stabil. Wasserstoffperoxid (H ₂ O ₂)
Tabletten:	80 mg NaCl, 0,075 mg Vitamin B2
Packungsinhalt:	Flasche, Neutralisationstabletten, Linsenbehälter, Beipackzettel
Verkaufsgrößen:	360 ml + 36 Tabletten / 60 ml + 6 Tabletten
Kartoneinheit:	20 Flaschen / 10 Flaschen

Verträglich & praktisch



S

WÖHLK SALINE

Die isotonische Abspüllösung für weiche & formstabile Contactlinsen.

- ⊕ Verträgliche Abspüllösung

Wirkungsweise

Spült Rückstände von Ablagerungen und Oberflächenreinigern oder nach Enzymreinigung und manueller Reinigung zuverlässig von der Contactlinsenoberfläche. Empfohlen wird, die Contactlinse von beiden Seiten mit einem Strahl mehrere Sekunden lang zu spülen.

Verwendungsbereich

- für weiche und formstabile Contactlinsen

Produktbeschreibung

Inhalt:	gepufferte, isotonische NaCl-Lösung
Konservierungsstoff:	Polyhexamethylen Biguanid, EDTA
Packungsinhalt:	Flasche, Beipackzettel
Verkaufsgrößen:	360 ml
Kartoneinheit:	24 Flaschen

Besonders gründlich & effektiv:



E

WÖHLK ENZYM

Die wöchentliche Intensivreinigung für weiche und formstabile Contactlinsen.

- ⊕ Gründliche, enzymatische Reinigung, auch von besonders hartnäckigen Protein-Ablagerungen.

Wirkungsweise

Das Enzym Subtilisin A bricht Eiweißverbindungen auf und entfernt so Proteinablagerungen effektiv. Wöchentliche Anwendung empfohlen.

Verwendungsbereich

- für weiche und formstabile Contactlinsen

Produktbeschreibung

Aktiver Inhaltsstoff:	1,5 mg Subtilisin A und Lösungsmittel
Packungsinhalt:	Tabletten, Beipackzettel
Verkaufsgrößen:	10 Tabletten
Kartoneinheit:	10 Packungen

So fühlen sich die Augen dauerhaft wohl



AS

WÖHLK AQUASAFE

Die Premium Kombilösung für weiche Contactlinsen.
Langanhaltende Frische über den ganzen Tag.


- ⊕ Komfortsteigerung durch Aquasafe®-Benetzungswirkstoff
- ⊕ Reinigt selbst bei stärkeren Ablagerungen durch Actipro®
- ⊕ Desinfiziert effektiv und zuverlässig
- ⊕ Schonende und verträgliche Inhaltsstoffe auch für empfindlichere Augen geeignet

Wirkungsweise

Der einzigartige Benetzungszusatz Aquasafe® lagert sich an der Linsenoberfläche an und bildet dort einen dünnen hydrophilen Film, der die Contactlinse nachhaltig und dauerhaft benetzbar macht. Dies sorgt für anhaltenden hohen Tragekomfort und bildet zugleich einen Schutzschild gegen Lipide, Mucine und Proteine: dank AquaSafe® wird die Linsenoberfläche mit jedem Lidschlag von diesen potentiellen Ablagerungen gereinigt.

Verwendungsbereich

- bei empfindlicheren und trockeneren Augen
- bei normaler Ablagerungsneigung
- bei sporadischem Linsentragen
- für Hydrogel-, Biohydrogel & Silikonhydrogellinsen

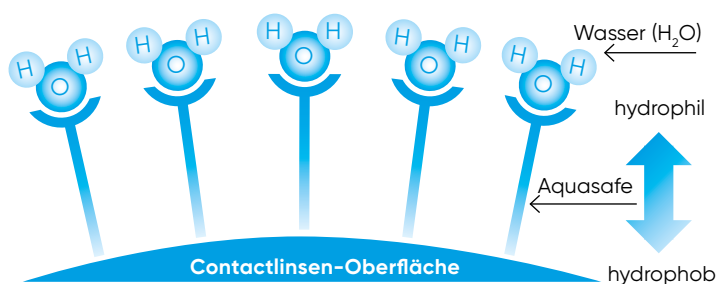

Produktbeschreibung

Aktive Inhaltsstoffe:	Aquasafe®, Actipro®
Konservierungsmittel:	0,0001% Polyhexanid
Packungsinhalt:	Flasche, Linsenbehälter, Beipackzettel
Verkaufsgrößen:	360 ml / 100 ml
Kartoneinheit:	24 Flaschen / 12 Flaschen

Bequem, verträglich & wirkungsvoll



CC

WÖHLK CONTACTCARE

Die klassische Kombilösung für weiche Contactlinsen.


- ⊕ Reinigt selbst stärkere Ablagerungen durch Actipro®
- ⊕ Desinfiziert effektiv und zuverlässig
- ⊕ Schonende und verträgliche Inhaltsstoffe auch für empfindlichere Augen geeignet

Wirkungsweise

Hartnäckige Protein-, Lipid- und Mucinablagerungen auf der Linsenoberfläche beeinträchtigen den Tragekomfort der Contactlinsen massiv. Actipro® verbindet sich während der Reinigungsphase mit den Ablagerungen und bewirkt, dass sich Wasser an den so entstandenen Komplexen anlagert und diese mühelos durch Abreiben und Abspülen entfernt werden können. Actipro® wirkt auch hervorragend bei Silikonhydrogel-Linsen.

Verwendungsbereich

- bei normaler Ablagerungsneigung
- bei sporadischem Linsentragen
- für Hydrogel-, Biohydrogel & Silikonhydrogellinsen

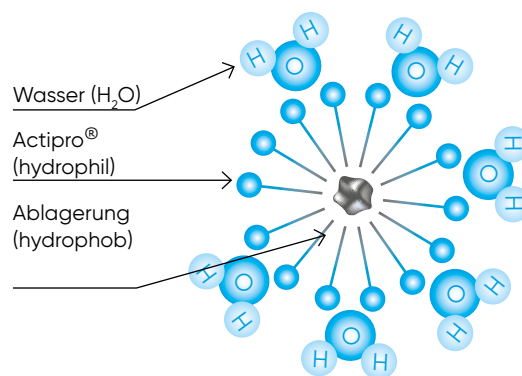

Produktbeschreibung

Aktiver Inhaltsstoff:	Actipro®
Konservierungsmittel:	0,0001% Polyhexanid
Packungsinhalt:	Flasche, Linsenbehälter, Beipackzettel
Verkaufsgrößen:	360 ml / 100 ml
Kartoneinheit:	24 Flaschen / 12 Flaschen

Für pflegende Lagerung
& optimale Benetzung:



A

WÖHLK AUFBEWAHRUNG

Die verträgliche Aufbewahrungslösung mit effektivem Benetzungswirkstoff für formstabile Contactlinsen.

- ⊕ Hervorragende Benetzungswirkung und schonende Konservierung
- ⊕ Bewährte und verträgliche Inhaltsstoffe auch für empfindliche Augen geeignet
- ⊕ Nach dem Aufsetzen sehr schnell klare Sicht

Wirkungsweise

Bildet an der Contactlinsenoberfläche einen dünnen hydrophilen Film, der diese nachhaltig und dauerhaft benetzbar macht. Dies sorgt für anhaltenden hohen Tragekomfort und macht die Oberfläche ablagerungsbeständig.

Verwendungsbereich

schonende Aufbewahrung und Benetzung
→ für formstabile Contactlinsen
→ auch zum Abspülen und Benetzen vor dem Tragen

Produktbeschreibung

Aktive Inhaltsstoffe:	Hydroxypropylmethylzellulose, Poloxamer
Konservierungsmittel:	0,1 % EDTA, 0,0004% Polyhexamethylen Biguanid
Packungsinhalt:	Flasche, Linsenbehälter, Beipackzettel
Verkaufsgrößen:	120 ml (45 ml mini-Duo A R)
Kartoneinheit:	20 Flaschen

Gründliche & schonende
Reinigung:



R

WÖHLK REINIGUNG

Die wirkungsvolle Oberflächenreinigung für formstabile Contactlinsen.

- ⊕ Duale Wirkungsweise von milden Tensiden und schonenden abrasiven Partikeln
- ⊕ Oberflächenschonend durch Kieselgel

Wirkungsweise

Die duale Wirkungsweise entfernt gründlicher hartnäckige Ablagerungen. Das Abrasivum (Kieselgel) bricht Bindungen mechanisch auf und löst diese von der Oberfläche. Tenside umhüllen Ablagerungen und weichen sie auf.

Verwendungsbereich

- bei normaler und höherer Ablagerungsneigung
- bei Neigung zu hartnäckigen Proteinablagerungen
- für formstabile Contactlinsen

Produktbeschreibung

Aktiver Inhaltsstoff:	Lauryläther Natriumsulfat, Kieselgel
Tabletten:	0,1 % EDTA, 0,001 % Polyhexamethylen Biguanid
Packungsinhalt:	Flasche, Beipackzettel
Verkaufsgrößen:	30 ml (15 ml im mini-Duo A R)
Kartoneinheit:	20 Flaschen

Wirkungsweise

Die duale Wirkungsweise entfernt effektiv stärkere Lipidablagerungen. Der Alkohol löst die Lipide von der Oberfläche. Tenside umhüllen die Ablagerungen und weichen sie auf. Zusätzlich wird die Oberflächenbenetzung verbessert.

Verwendungsbereich

- bei stärker fetthaltigem Tränenfilm
- bei normaler und höherer Ablagerungsneigung
- für weiche und formstabile Contactlinsen (kürzere Anwendungszeit bei weichen Contactlinsen)

Produktbeschreibung

Aktive Inhaltsstoffe:	Borsäure, Natriumtetraborat, Hydroxyethylcellulose, Dinatriumcocoamphodiacetat, Isopropylalkohol 20%, Dinatriumedetat 0,1 %, gereinigtes Wasser
Konservierungsmittel:	Keine
Packungsinhalt:	Flasche, Beipackzettel
Verkaufsgrößen:	30 ml
Kartoneinheit:	10 Flaschen

Effektive Reinigung bei
Lipidablagerungen



LR

WÖHLK LIPIDREINIGUNG

Die gründliche Oberflächenreinigung bei besonders starken Lipid-Ablagerungen für weiche und formstabile Contactlinsen

- ⊕ entfernt Lipidablagerungen durch die duale Wirkungsweise von milden Tensiden und fettlösendem Isopropylalkohol
- ⊕ Reinigt und desinfiziert effektiv
- ⊕ Unterstützt eine bessere Oberflächenbenetzung